



Sådan samler du

1

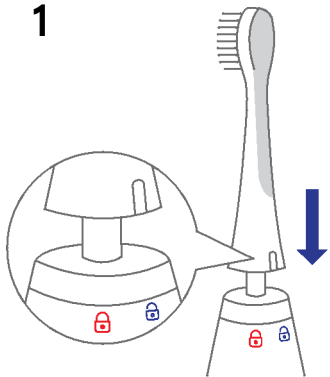

Indsæt børstehovedet i hovedenheden. Børstehovedet skal være vinklet med den **blå hængelås**.

2

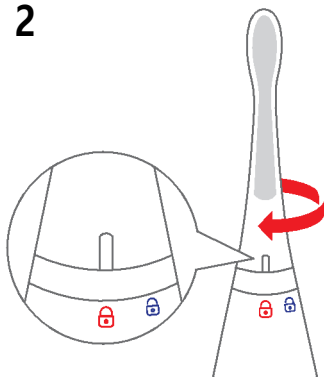

Drej børstehovedet med uret, således at børstehovedet flugter med den **røde hængelås**, hvorved børstehovedet fastgøres.

Brugsanvisning

Tilstand
1

ON



OFF

Hvis knappen trykkes på i **lang tid**, så slukkes tandbørsten.



Hver gang knappen trykkes på i **kort tid**, så skifter man mellem **vibrationsfunktionen** og **sugefunktionen**.

Tilstands-
ændring

Når tandbørsten er slukket, kan tilstanden ændres ved at trykke på knappen i 3 sekunder.

Tilstand
2

ON



OFF

Hver gang du trykker **kortvarigt** på knappen, så vil tandbørsten tændes og slukkes.



I denne tilstand vil **vibrationsfunktionen** og **sugefunktionen** fungere på samme tid.

 **OBS**



Tjek om flappen, der dækker opladningsstikket, er lukket.



Undgå at lægge hovedenheden i vand.



Stop med at bruge tandbørsten og stop opladning, hvis vand er trængt ind i hovedenheden.



Sørg for at ledningen ikke er knækket under brug.